

Varastossa Tampereella

Hengityssuojain COVAFLU™ FFP2

COVAFLU™ hengityssuojaimen turvallisuustaso on **henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukainen ja sillä on CE-merkki**. Laadukas COVAFLU™ hengityssuojain suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä bakteereilta ja viruksilta, **kuten koronavirukselta**.

HUOM! Tuotteet varastossamme Tampereella. Kello 12 mennessä saapuneet tilaukset toimitetaan tilausta seuraavana arkipäivänä kaikkialle Suomeen.



Alkaen
4,90 €
kpl, alv 0 %

Tilaa verkossa: www.medicale.fi

+ Täyttää suojainasetukset

COVAFLU™ FFP2 hengityssuojaimen turvallisuustaso on henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukainen ja sillä on CE-merkki.

+ Suojaa tehokkaasti

Kertakäyttöinen, tehokkaasti suodattava COVAFLU™ FFP2 hengityssuojain auttaa suojautumaan influenssaa (koronavirus, sikainfluenssa, lintuinfluenssa) vastaan.

+ Yksinoikeudella Euroopasta

Tilaamme yksinoikeudella valmistetut hengityssuojaimet luotettavalta ja tunnetulta Eurooppalaiselta toimittajaltamme, joka on toiminut jo vuodesta 2006.

Täyttää Maailman terveysjärjestön (WHO) asettamat suositukset

Laadukas ja tunnettu COVAFLU™ FFP2 hengityssuojain täyttää Maailman terveysjärjestön (WHO) suositukset riskien minimoimiseksi pandemiaksi levinneen flunssan aikana. Tuote on suunniteltu kaikille lisäsuojaksi siinä tilanteessa, kun virus alkaa levitä nopeasti ihmisten keskuudessa.

medicale⁺

Medicale Group
Varastokatu 3, 33100 TAMPERE
Keilaranta 1, 02150 ESPOO
www.medicale.fi

TEKNISET TIEDOT

COVAFLU™ hengityssuojaimen turvallisuustaso on henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 mukainen ja sillä on CE-merkki.


COVAFLU™ FFP2 hengityssuojain on valmistettu useita kerroksia käyttämällä (ks. kuva) jonka ansiosta suojain suodattaa tehokkaasti hiukkasia, tuntuu miellyttävältä kasvoilla ja on kestävä.

CE CE-merkitty tuote



Maailmanlaajuisesti tunnettu toimittaja

Yksittäispakattu hengityssuojain on puhdas ja heti valmis käytettäväksi

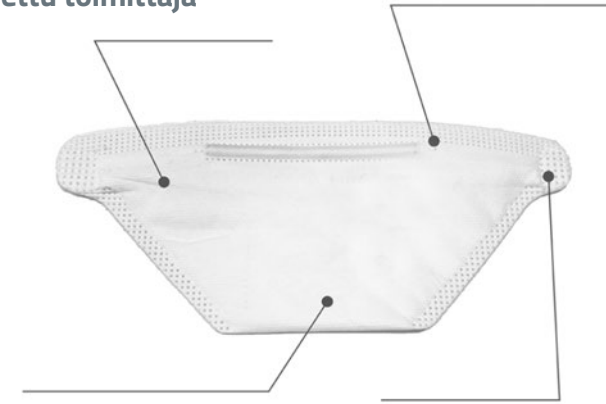


Tehokas suodatus mutta pieni hengitysvastus suojaimessa käytetyn materiaalin ansiosta

Säädettävä kuminauha, sopii kaikenkokoisille kasvoille

Täyttää EN 149:2001 standardin vaatimukset

Kevyt ja helpokäyttöinen

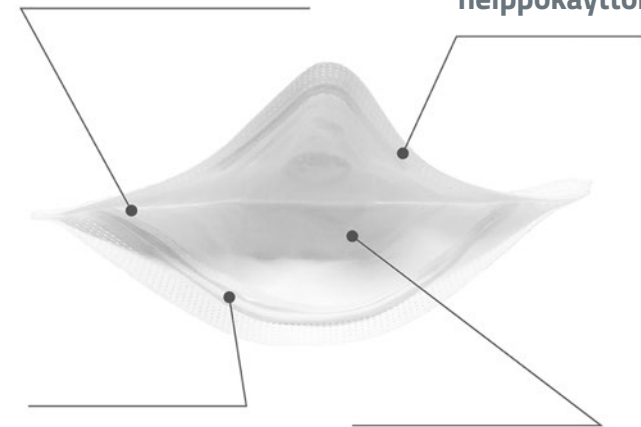

Täyttää henkilökohtaisten suojaimien (PPE) direktiivit, CE merkitty tuote

Pehmustettu sisäpuoli on miellyttävän tuntuinen kasvoille

Tilaa verkossa: www.medicale.fi

4,90 €
kpl, alv 0 %

3.840 kpl

Saatavilla heti!

Yht. **18.816 €**, alv 0 %

Toimituskulut sisältyvät hintaan.
Toimitusaika 1-2 arkipäivää.
Maksuehto 14 pv nto.

5,25 €
kpl, alv 0 %

2.880 kpl

Saatavilla heti!

Yht. **15.120 €**, alv 0 %

Toimituskulut sisältyvät hintaan.
Toimitusaika 1-2 arkipäivää.
Maksuehto 14 pv nto.

5,75 €
kpl, alv 0 %

1.920 kpl

Saatavilla heti!

Yht. **11.040 €**, alv 0 %

Toimituskulut sisältyvät hintaan.
Toimitusaika 1-2 arkipäivää.
Maksuehto 14 pv nto.

5,90 €
kpl, alv 0 %

960 kpl

Saatavilla heti!

Yht. **5.664 €**, alv 0 %

Toimituskulut sisältyvät hintaan.
Toimitusaika 1-2 arkipäivää.
Maksuehto 14 pv nto.

Tilaa verkossa!

Tuotteet varastossamme Tampereella. Kello 12 mennessä saapuneet tilaukset toimitetaan tilausta seuraavana arkipäivänä kaikkialle Suomeen.

HUOM! Hengityssuojaimille on tällä hetkellä valtava kysyntä joten tee tilauksesi mahdollisimman pian, jotta varmistat tuotteiden saatavuuden itsellesi. Tuotteet toimitetaan asiakkaille tilausjärjestyksessä. Kysy myös suurempia eriä.

Tero Rinne, myynti ja tiedustelut

 +358 40 52 89 866

asiakaspalvelu@medicale.fi

Medicale Group on korkealaatuisten, lääketieteellisten tarvikkeiden myyntiin erikoistunut yritys. Haluamme edistää terveydenhuoltoalan kustannustehokkuutta tarjoamalla kilpailijoitamme selvästi edullisemmat hinnat alan johtavilta valmistajilta. Tilaukset ja tarjouspyynnöt on helppo tehdä verkkosivujemme kautta juuri silloin kun sinulle itsellesi sopii. Takaamme joustavat ja täsmälliset toimitukset kaikkialla Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Haluamme olla terveydenhuoltoalan tehokkain ja luotettavin yhteistyökumppani – nyt ja tulevaisuudessa.

medicale⁺

Medicale Group
Varastokatu 3, 33100 TAMPERE
Keilaranta 1, 02150 ESPOO
www.medicale.fi

KÄYTTÖOHJEET COVAFLU™ FFP2

Kertakäyttöinen FFP2 hengityssuojain

EN 149:2001 + A1:2009 mukaisesti hyväksytty

CE sertifioitu

Suojaa hiukkasilta ja nestemäisiltä hiukkasilta (EN 149: 2001 + A1:2009)

Tuotteen oikean ja turvallisen käytön takia, luethan huolellisesti nämä käyttöohjeet ja noudatat niitä käyttäessäsi hengityssuojainta.

Tätä hengityssuojainta tulee käyttää vain alla olevien ohjeiden mukaisesti

1. Ota hengityssuojain pois pakkauksesta ja avaa suojaimen taitokset varovaisesti.
2. Taivuta suojaimen nenäkappaletta nenäsi mukaisesti.
3. Sovittaaksesi suojainta, venytä varovasti suojaimen kumilenkkejä samalla lenkkien kiinnityskohdista varmistaen.
4. Aseta hengityssuojain kasvoille niin, että se peittää nenän ja suun. Aseta suojaimen nenäkappale tiiviisti nenääsi vasten. Asettele tämän jälkeen suojain niin, että sen alaosa on leuan alla ja yläosa tiiviisti nenääsi vasten. Varmista, ettei suojaimen pääse ilmaa suojaimen ulkoreunoista. Asettele tämän jälkeen suojaimen kuminauhhat mukaillemaan päätäsi ja varmista samalla ettei se vaikuta suojaimen asetteluun kasvojasi vasten. Hengityssuojaimen huolellinen asettelu kasvoille vaikuttaa siihen, että se suojaa oikealla tavalla.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät ehdot

- Ennen tämän suojaimen käyttöä, varmista, että tämä suojain soveltuu siihen käyttötarkoitukseen ja ympäristöön, jossa olet. Suojaimen väärä käyttö voi asettaa terveytesi, tai jopa henkesi vaaraan. Varmista ammattilaiselta (sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen tai lääkäri) oikeantyyppisen suojaimen käyttö.
- Suojaimen väärinkäyttö voi aiheuttaa haittaa terveydellesi, joten lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
- Tämä suojain ei tuota happea, joten sitä tulee käyttää tehokkaasti ilmastoidussa tilassa. Mikäli ympärilläsi olevan ilman happipitoisuus laskee alle 17%, sinua voi alkaa heikottaa, tulla hengitysvaikeuksia tai voit jopa pyörtyä. Mikäli näin tapahtuu, sinun tulee välittömästi palata hyvin ilmastoituun tilaan välttääksesi pahemmat seuraukset.
- Älä käytä tätä suojainta, mikäli et tiedä tarkalleen mitä myrkyjä voit mahdollisesti kohdata.
- Niiden henkilöiden, joilla on esim. parta tai epäsymmetriset kasvot, tulee kiinnittää erityistä huomiota asetellessaan suojainta kasvoille. Varmista tällöin erityisen tarkasti, ettei kasvojen ja maskin väliin jää ilmarakoja.
- Älä yritä muokata tätä suojainta. Tämä suojain on suunniteltu ja sertifioitu sinun turvallisuuttasi ajatellen.
- Tämä suojain on kertakäyttöinen, max. käyttöaika 8h. Tämän jälkeen se ei suojaa enää riittävästi.
- Säilytys: Varmista ettei tilassa, jossa suojaimia säilytetään, kosteusprosentti on alle 70 % ja huoneen lämpötila -25° ja +40° välillä. Suojaimen käyttöominaisuudet ja suojaavuus voivat heikentyä kolmen vuoden jälkeen, joten suojainta ei tule käyttää parasta ennen -päiväyksen jälkeen. Varmista, että suojaimet hävitetään, mikäli parasta ennen -päiväys on mennyt.
- Tämä hengityssuojain suojaa sinua vain, jos noudatat näitä suosituksia ja ohjeita.

COVAFLU™ FFP2 -hengityssuojain täyttää Maailman terveysjärjestön (WHO) täyttämät vaatimukset riskien minimoimiseksi pandemiaksi levinneen flunssan aikana. Tuote on suunniteltu kaikille lisäsuojaksi siinä tilanteessa, kun virus alkaa levitä nopeasti ihmisten keskuudessa.

Vaikka FFP2-tason hengityssuojain suojaa ilmassa olevilta hiukkasilta, se ei takaa täyttä immuniteettia pandemiatason flunssaa vastaan. Nouda myös muita ennaltaehkäiseviä toimia, joista on yleisesti ohjeistettu pandemian aikana.